




Sistema Fechado de Aspiração

Healthcare Air Filtration

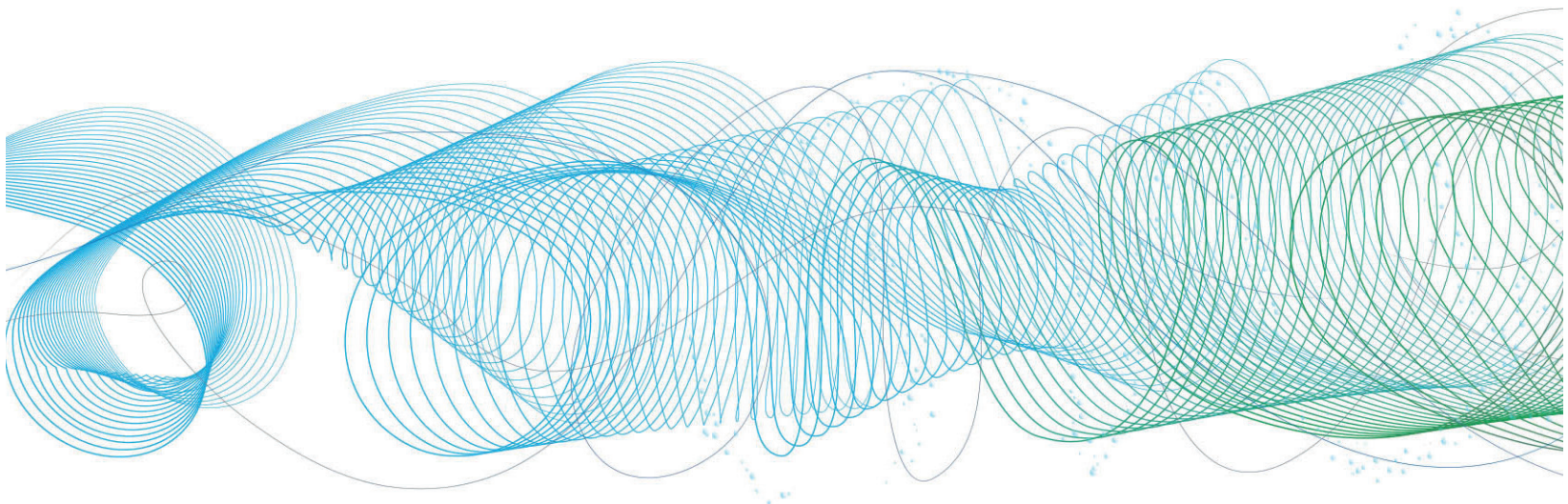

Sistema Fechado de Aspiração GVS

O sistema fechado de aspiração da GVS, possibilita remover as secreções das vias aéreas sem desconectar o circuito de ventilação mecânica do paciente, garantindo a continuidade da oxigenação durante o procedimento de aspiração.

Com design ergonômico, o sistema é de fácil operação e possui interruptor de sucção com dispositivo de travamento. Com capa protetora clara, possibilita fácil visualização durante a utilização.

Com ângulo de 120°, o conector duplo giratório reduz a resistência do ar na ventilação mecânica durante a aspiração.

Características

Seguro e de alta eficiência

- Boa estanqueidade com dupla proteção para os pacientes e para as equipes médicas;
- Mantém a ventilação mecânica e oxigenação do paciente durante o procedimento;
- Material liso e macio proporcionando conforto ao paciente, sem prejudicar a mucosa e vias aéreas;
- Tempo de uso de 24 e 72 horas, reduzindo resíduos e custos médicos;
- Reduz o risco de infecção hospitalar;

Fácil Operação

- Design ergonômico do interruptor de sucção, com dispositivo de travamento;
- Material da capa protetora claro e transparente de fácil visualização;
- Design das conexões rotativas duplas giratórias de fácil rotação para proteção do paciente;
- Sistema é equipado com tubos extensíveis e separadores para fácil conexão do endotraqueal;

Fácil Identificação

- O sistema está em conformidade com o código de cores internacional que distingue os modelos;
- Acompanha um cartão de código de cores conveniente para enfermagem identificar a data de substituição;

Modelos completos

Para adultos e crianças; 24 horas e 72 horas;

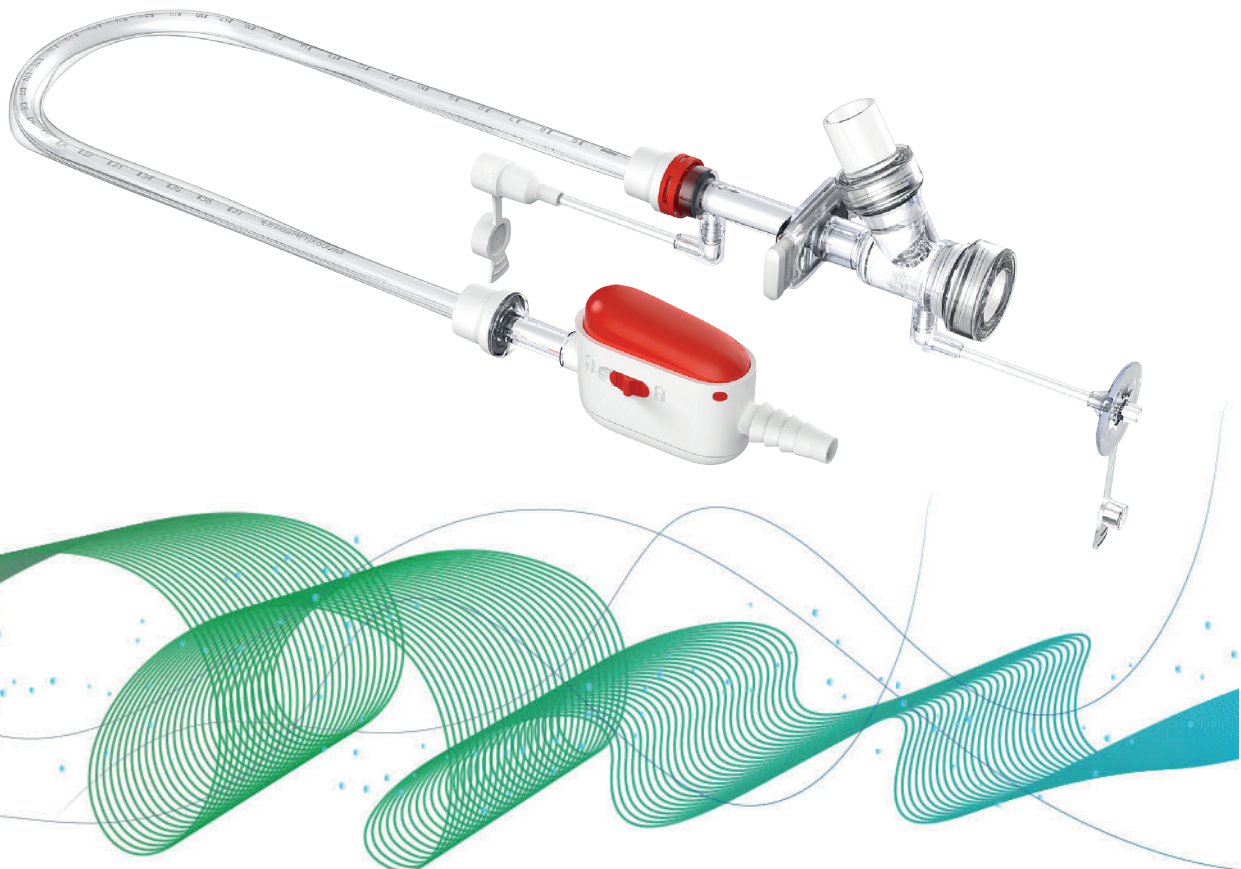
















Tabela de códigos, cores e aplicação

O Diâmetro externo do Catheter pode ser identificado através do código de cores da tabela abaixo

	Código GVS	"Diâmetro Externo do Catheter"		Comprimento	Aplicação	Codigo de Cores		Embalagem
		Ø (FR)	Ø (mm)					
Uso 24 Horas	CIRMAFBSPC000007	Fr6	(2,00 mm)	40 cm	Pediátrico	Verde Claro		100 Peças por Caixa
	CIRMAFBSPC000008	Fr8	(2,67 mm)			Azul Claro		
	CIRMAFBSPC000009	Fr10	(3,33 mm)	60 cm	Adulto	Preto		
	CIRMAFBSPC000010	Fr12	(4,00 mm)			Branco		
	CIRMAFBSPC000011	Fr14	(4,67 mm)			Verde		
	CIRMAFBSPC000012	Fr16	(5,33 mm)			Laranja		
	CIRMAFBSPC000013	Fr18	(6,00 mm)			Vermelho		
Uso 72 Horas	CIRMAFBSPC000014	Fr6	(2,00 mm)	40 cm	Pediátrico	Verde Claro		100 Peças por Caixa
	CIRMAFBSPC000015	Fr8	(2,67 mm)			Azul Claro		
	CIRMAFBSPC000016	Fr10	(3,33 mm)	60 cm	Adulto	Preto		
	CIRMAFBSPC000017	Fr12	(4,00 mm)			Branco		
	CIRMAFBSPC000018	Fr14	(4,67 mm)			Verde		
	CIRMAFBSPC000019	Fr16	(5,33 mm)			Laranja		
	CIRMAFBSPC000020	Fr18	(6,00 mm)			Vermelho		

Acessórios / Configuração Convencional dos Kits

- 1 Tubo extensor (reduz o peso do circuito sobre o tubo endotraqueal)
- 2 Separador (para fácil manuseio e desconexão do tubo endotraqueal)
- 3 Cartão de código de cores (adesivo de datas para indicar o dia da troca)
- 4 Adptador ET - Conversão do tubo endotraqueal (para crianças)
- 5 Set de Injeção MDI - Kit de injeção de medicamentos (para crianças)


1



2



3

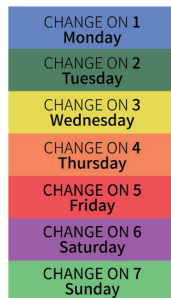

4



5





REDE MUNDIAL

EUROPA

Escritório de Itália
Sede
GVS S.p.A.
Via Roma 50
40069 Zola Predosa (BO) - Italy
Tel. +39 051 6176311
gvs@gvs.com

Rússia
GVS Russia LLC.
Profsoyuznaya Street, 25-A, office 102
117418, Moscow
Russian Federation (Russia)
Tel. +7 495 0045077
gvsrussia@gvs.com

Reino Unido
GVS Filter Technology UK
Vickers Industrial Estate
Mellishaw Lane, Morecambe
Lancashire LA3 3EN
Tel. +44 (0) 1524 847600
gvsuk@gvs.com

Turquia
GVS Türkiye
Nidakule Merdivenköy Mahallesi
Bora Sokak No:1 Kat:7 - 34732 Istanbul
Tel. +90 216 504 47 67
gvsturkey@gvs.com

ÁSIA

China
GVS Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Fengqiao Civil-Run Sci-Tech Park,
602 Changjiang Road,S.N.D.
Suzhou, China 215129
Tel. +86 512 6661 9880
gvschina@gvs.com

GVS YIBO Medical Devices Co. Ltd.
17, Zhongshan East - Yuyao city,
315403 Zhejiang Province, China
Tel. +86 574 6257 5697

Japão
GVS Japan K.K.
KKD Building 4F, 7-10-12 Nishishinjuku
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan
Tel. +81 3 5937 1447
gvsjapan@gvs.com

Coreia do Sul
GVS Korea Ltd
#315 Bricks Tower
368 Gyungchun-ro(Gaun-dong),
Namyangju-si, Gyunggi-do,
Tel: +82 31 563 9873
gvsukorea@gvs.com

Índia
GVS Filter India Pvt Ltd
Unit No 35 & 36 on First Floor
Ratna Jyot Industrial Premises Irla Lane,
Irla Vile Parle, Mumbai 400056, India
gvsindia@gvs.com

Malásia
GVS Filtration Sdn.Bhd
Lot No 10F-2B, 10th Floor, Tower 5 @ PFCC
Jalan Puteri 1/2, Bandar Puteri
47100 Puchong, Selangor, Malaysia
Tel: +60 3 7800 0062
gvsmalaysia@gvs.com

Tailândia
GVS Thailand
88 Ratchadaphisek Rd,
Office 10E03 - Khlong Toei,
Bangkok 10110
gvsthailand@gvs.com

AMÉRICA

EUA
GVS North America
63 Community Drive
Sanford, ME 04073 - USA
Tel. +1 866 7361250
gvsusa@gvs.com

GVS Filtration Inc.
2150 Industrial Drive
Findlay, OH. 45840 - USA
Tel. +1.419.423.9040
gvsfiltration@gvs.com

2200 W 20th Avenue
Bloomer, WI 54724 - USA
Tel. +1.715.568.5944
gvsfiltration@gvs.com

Argentina
GVS Argentina S.A.
Francisco Acuña de Figueroa 719 Piso:11 Of: 57
1416 Buenos Aires - Argentina
Tel. +54 11 48614750
gvsarg@gvs.com

Brasil
GVS do Brasil Ltda.
Rodovia Conego Cyriaco Scaranello Pires 251
Jd. Progresso, CEP 13190-000
Monte Mor (SP) - Brasil
Tel. +55 19 38797200
gvs@gvs.com.br